

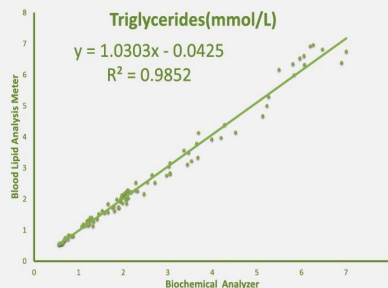


รายการทดสอบ	ใช้ได้กับแผ่นตรวจ 4 แบบ			
	LPS-101	TCS-101	HLS-101	TGS-101
ค่าที่ตรวจวัด				
คอเลสเตอรอลรวม (TC)	✓	✓		
เอชดีแอล (HDL)	✓		✓	
ไตรกลีเซอไรด์ (TG)	✓			✓
ค่าคำนวณ				
แอลดีแอล (LDL)	✓			
อัตราส่วน TC/HDL (TC/HDL Ratio)	✓			

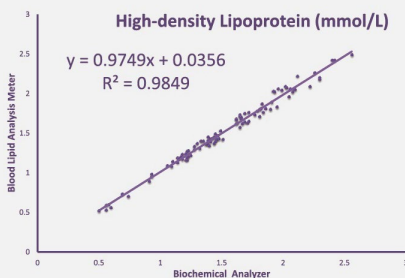

- ทดสอบอย่างง่าย รวดเร็ว**
อ่านผลไวกายใน 120 วินาที
- แหล่งพลังงาน**
ใช้แหล่งพลังงานจากถ่าน AAA จำนวน 3 ก้อน
- ใช้เลือดปริมาณน้อย**
10-35 ไมโครลิตร
เลือดครบส่วนจากปลายนิ้ว เส้นเลือดดำ, พลาสมา, ซีรัม
- แม่นยำ**
ผลการตรวจสอบคล่องกับผลการตรวจโดยเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีในโรงพยาบาล
- ช่วงการอ่านผลกว้าง**
ช่วงการอ่านผลกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับชุดตรวจชนิดเดียวกัน
- บันทึกผลการตรวจ**
หน่วยความจำ 500 หน่วย

ค่าความแม่นยำ ระหว่างเครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด LYSUN และ เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีในโรงพยาบาล

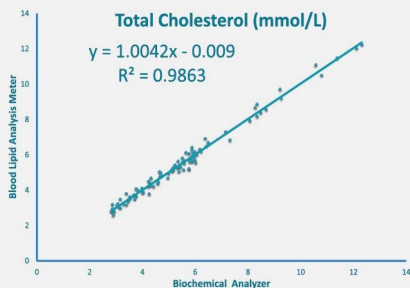


ไม่ต้องใช้น้ำยาสอบเทียบก่อนการใช้งาน



Test device preparation.




Specimen collection.

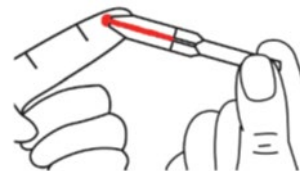

Specimen analysis.



Displaying results.

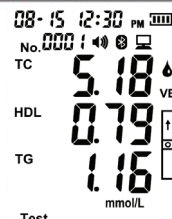

คุณสมบัติเฉพาะ

หลักการทำงาน	วัดความเข้มแสงจากการสะท้อน (Reflectance Photometer)
เวลาอ่านผล	≤ 2 นาที
ช่วงการวัด	คอเลสเตอรอลรวม (TC): 100–500 mg/dL เอชดีแอล (HDL): 15–100 mg/dL ไตรกลีเซอไรด์ (TG): 45–650 mg/dL
ชนิดตัวอย่างเลือด	เลือดครบส่วนจากปลายนิ้ว เส้นเลือดดำ, พลาสมา, ซีรัม
ปริมาณเลือดที่ใช้	10–35 ไมโครลิตร
แหล่งพลังงาน	ถ่าน AAA
หน่วยวัด	mg/dL
หน่วยความจำ	500 ครั้ง
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	ภายใน 5 นาทีเมื่อไม่มีการใช้งาน
ขนาดตัวเครื่อง	135 มม. x 66 มม. x 19 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	90 กรัม
การเก็บรักษาตัวเครื่อง	อุณหภูมิ 0–55 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90%
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ 10–35 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 80%; ในร่มเท่านั้น
การเก็บรักษาแพนตรวจและสารละลายควบคุม	อุณหภูมิ 2–30 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90%
ระยะเวลาประกัน	2 ปี



ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย : บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส์ จำกัด
ที่อยู่ 523/15 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 02-462-8546 เว็บไซต์ : www.3cmedical.co.th

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้