




รายการทดสอบ	ใช้ได้กับแผ่นตรวจ 4 แบบ			
	RFS-101	CRS-102	UAS-101	URS-101
				
ค่าที่ตรวจวัด				
ครีเอตินิน (CR)	✓	✓		
ยูเรีย (UR)	✓			✓
ยูริก (UA)	✓		✓	

*BUN (mg/dL) = Urea (mg/dL) / 2.14



- ทดสอบอย่างง่าย รวดเร็ว**
อ่านผลไภายใน 300 วินาที
- ใช้เลือดปริมาณน้อย**
10-35 ไมโครลิตร
เลือดครบส่วนจากปลายนิ้ว เส้นเลือดดำ, พลาสมา, ซีรัม
- ช่วงการอ่านผลกว้าง**
ช่วงการอ่านผลกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับชุดตรวจชนิดเดียวกัน
- บันทึกผลการตรวจ**
หน่วยความจำ 500 หน่วย
- ชาร์จไฟได้**
ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 1200 mAh
- บลูทูธ**
ส่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ได้
- โปรแกรมอัปเดต**
อัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ
- แม่นยำ**
ผลการตรวจสอบคล่องกับผลการตรวจโดยเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีในโรงพยาบาล

ค่าความแม่นยำ ระหว่างเครื่องตรวจวัดการทำงานของไต LYSUN และ เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีในโรงพยาบาล

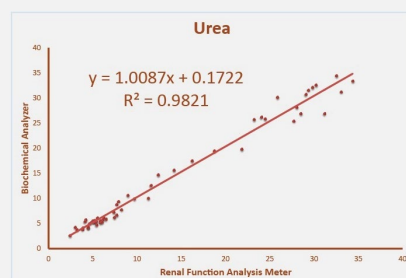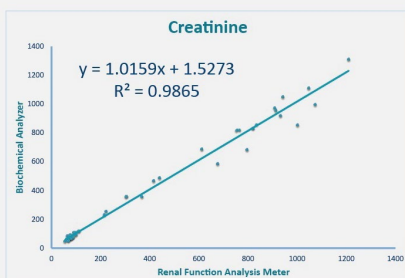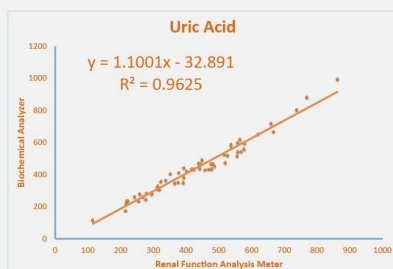

ไม่ต้องใช้น้ำยาสอบเทียบก่อนการใช้งาน




คุณสมบัติเฉพาะ

หลักการทำงาน	วัดความเข้มแสงจากการสะท้อน (Reflectance Photometer)
เวลาอ่านผล	≤ 5 นาที
ช่วงการวัด	กรดยูริก (UA): 1.51–20.17 mg/dL ครีเอตินีน (CR): 0.50–14.93 mg/dL ยูเรีย (UR): 5.41–240.24 mg/dL
ชนิดตัวอย่างเลือด	เลือดครบส่วนจากปลายนิ้ว เส้นเลือดดำ, พลาสมา, ซีรัม
ปริมาณเลือดที่ใช้	10–35 ไมโครลิตร
แหล่งพลังงาน	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1200 mAh
ความคงทนของแบตเตอรี่	ความจุของแบตเตอรี่ลดลง 30% หลังจากจำนวนรอบการชาร์จแบตเตอรี่ 300 รอบ
หน่วยวัด	mg/dL
หน่วยความจำ	500 ครั้ง
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	ภายใน 5 นาทีเมื่อไม่มีการใช้งาน
ขนาดตัวเครื่อง	135 มม. x 66 มม. x 19 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	90 กรัม
การเก็บรักษาตัวเครื่อง	อุณหภูมิ 0–55 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90%
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ 10–35 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90%; ความสูง < 2000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
การเก็บรักษาแพ็คเกจและสารละลายควบคุม	อุณหภูมิ 2–30 °C; ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90%
ระยะเวลาประกัน	2 ปี

Test device preparation.



Specimen collection.

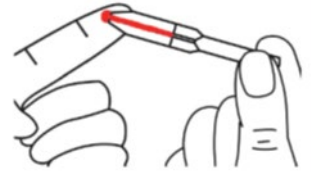

Specimen analysis.



Displaying results.



ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย : บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส์ จำกัด
ที่อยู่ 523/15 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 02-462-8546 เว็บไซต์ : www.3cmedical.co.th

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยไม่ต้องการอนุญาต